

SONIC | **enchant.**

enchantTM

Bezaubernd smart



 **SONIC**
Everyday Sounds Better

Was macht einen magischen Moment aus? Eine leichte Brise und zarte Sonnenstrahlen auf Ihrer Haut. Der frische Duft der Natur. Herzhaftes Lachen und gut gelaunte Stimmen aus allen Richtungen. Alle Ihre Sinne werden miteinander verknüpft und als vollendetes Bild in Ihrer Erinnerung abgespeichert. Warum sollte ein Hörverlust dieses Erlebnis schmälern?



enchant™

Bringen Sie mit Enchant wieder Brillanz in Ihren Höralltag. Das neue Hörgerät von Sonic ist mit der revolutionären SoundDNA-Plattform ausgestattet und bietet modernste Premium Features für einen einzigartigen und natürlichen Klang. Die leistungsstarke Technologie passt sich instinktiv an Ihre Hörsituationen an, um Sprache klar zu übertragen und Störgeräusche smart zu minimieren. Mit Enchant klingt jeder Tag besser.



Enchant blendet Störgeräusche gezielt aus

Ein herkömmliches Mikrofon kann jedes Geräusch um uns herum aufnehmen und verstärken. Aber Enchant ist weitaus intelligenter. **Speech in Noise (SPiN) Management** vereint mehrere Technologien, um die Klänge hervorzuheben, die Sie hören möchten, und störende Geräusche automatisch auf ein Minimum zu reduzieren. Zusätzliche Sonic Algorithmen helfen, Sprach- und Störgeräuschanteile voneinander zu trennen, so dass Gespräche wesentlich deutlicher werden.



Programme zum Wohlfühlen

Egal ob Sie abends ausgehen, auf einem Konzert sind oder ein Abenteuerurlaub vor Ihnen liegt, Enchant hält mit jeder Hörsituation Schritt. Die Enchant Familie beinhaltet bis zu 14 spezielle Hörprogramme, darunter auch diese exklusiven Programme. Ihr Hörakustiker kann die Programme und Features aktivieren, die Sie am häufigsten brauchen.

Sie mögen Filme oder Theater?

Durch den neuen **Dynamic Optimizer** werden laute und voluminöse Klänge kristallklar und verzerrungsfrei übertragen. Exklusiv für das Enchant¹⁰⁰.

Sie hören gerne Musik?

Das Programm **Live Musik** erkennt die Stimmung und den Verlauf von Live Musik und erweitert den Übertragungsbereich. Das ermöglicht Ihnen, dynamische und unverzerrte Musik zu genießen — egal ob als Zuhörer oder als Musiker.

Sie sind oft auf Reisen?

Das **Programm Flugzeug** (exklusiv für Enchant¹⁰⁰) bekämpft typischen Flugzeuglärm, z. B. von Turbinen oder startenden Motoren. So können Sie die Gespräche mit Ihrem Sitznachbarn wieder genießen oder dem Bordprogramm zuhören und bleiben bei wichtigen Fluginformationen auf dem Laufenden.



Enchant unterdrückt Rückkopplungen

Lästiges Rückkopplungspfeifen hat schon viele Menschen davon abgehalten, Hörgeräte zu testen. Sonic Hörgeräte – einschließlich Enchant – sind mit einer adaptiven Rückkopplungsunterdrückung ausgestattet. Rückkopplungen werden registriert und ausgelöscht, noch bevor das lästige Pfeifen hörbar wird.



Enchant hat besondere Programme für Tinnitusbetroffene

Enchant unterstützt Sie mit Tinnitus SoundSupport bei Ihrem Tinnitus-Programm. Sowohl durch die Verstärkung der Hörumgebung als auch durch zusätzliche Klänge kann dieses flexible Feature den Umgang mit dem Tinnitus erleichtern.



Enchant ist vor Feuchtigkeit geschützt

Lassen Sie sich durch Kleinigkeiten ins Schwitzen bringen? Mit Enchant ist das kein Problem! Mit der zertifizierten Schutzklasse IP68* ist Enchant bereit für Sport, Regen und alles, was der Alltag so mit sich bringt.

* IP68 = staub- und wasserdicht
Tragen Sie Ihr Hörgerät nicht beim Duschen, Schwimmen oder Tauchen.



Wireless ist wunderbar

Bluetooth® Verbindungen zu Ihrem Telefon, Ihrem Auto oder Ihrem Computer sind schon alltäglich geworden. Sie tragen ebenfalls dazu bei, dass Enchant so komfortabel ist. Anstelle der Lautstärke- und Programmregler am Hörgerät verwenden Sie einfach und bequem Ihr Smartphone oder Wireless Zubehör von Sonic.




Dual-Radio Wireless Transmission

Die Begeisterung über die kabellose Freiheit wird mit Enchant noch größer. Dual-Radio Wireless Transmission verwendet die 2,4 GHz Technology. Das bedeutet, Sie brauchen für das Audiostreaming zu Ihren Hörgeräten kein weiteres zwischengeschaltetes Gerät. Außerdem wird Near-Field Magnetic Induction (NFMI) verwendet, um eine schnellere Kommunikation zwischen den Geräten zu ermöglichen und die Batterieleistung zu optimieren.



Smarter Komfort

Sie nutzen Ihr iPhone® oder Android™ Smartphone, um zu telefonieren, E-Mails zu schreiben, Nachrichten zu versenden und Musik zu hören — warum nutzen Sie es nicht auch, um Ihre Hörgeräte zu bedienen? Laden Sie die kostenlose **SoundLink 2 App*** auf Ihr iPhone oder Android Smartphone und ändern Sie die Lautstärke oder die Programme Ihrer Hörgeräte bequem und diskret. Die App beinhaltet eine „Hörgeräte finden“-Suchfunktion, Zugriff auf Bedienungsanleitungen und einen Alarm bei niedrigem Batteriestatus. Enchant Hörgeräte mit 2.4 GHz Technology wurde für iPhone®, iPad®, iPod® entwickelt und erlauben direktes Stereostreaming von diesen Geräten. Zusammen mit SoundClip-A eignen sie sich für alle Telefone.

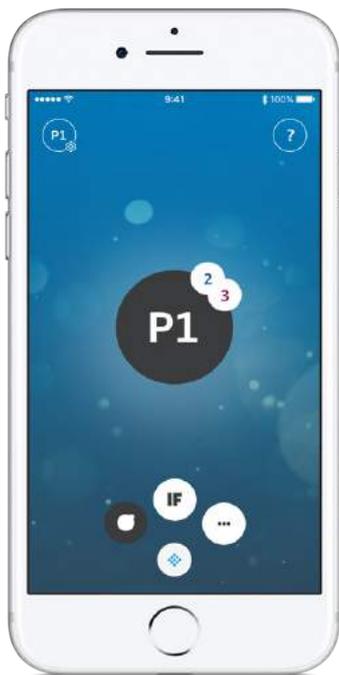

Made for
 iPhone | iPad | iPod

Wireless Zubehör

Mit 2,4 GHz Technology noch mehr Möglichkeiten für diskrete und angenehme Hörerlebnisse

- » **SoundClip-A** – Sie können jetzt mit Android™ Smartphones, Tablets und einer Vielzahl von Bluetooth® kompatiblen Geräten streamen. Der SoundClip-A fungiert außerdem als Mikrofon und Fernbedienung und ermöglicht Ihnen so, Ihre Hörgeräte als Kopfhörer für den Freisprechbetrieb zu verwenden.
- » **RC-A Fernbedienung** – Ändern Sie Lautstärke und Programme mit einem Klick. Klein genug für die Hand- oder Hosentasche.
- » **TV-A Adapter** – Streamen Sie Ihre Lieblingsprogramme direkt und kabellos in Ihre Enchant Hörgeräte. Der Adapter lässt sich leicht an die meisten TV-Geräte anschließen. Es wird kein weiteres Zwischengerät benötigt.



Sonic Enchant und die SoundLink2 App sind kompatibel mit iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9,7" iPad Pro, 12,9" iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. Generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini und iPod touch (5. und 6. Generation). Auf den Geräten muss iOS 9.3 (oder höher) installiert sein. Die App unterstützt auch die Apple Watch. Um die Sonic SoundLink 2 App auf Ihr iPad zu laden, gehen Sie zum App Store, suchen Sie nach Sonic und verwenden Sie den Filter: nur iPhone. Die Sonic SoundLink2 App ist kompatibel mit Android™ 6.0, Marshmallow (oder höher). Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter www.sonic.global/compatibility.

* Verfügbar für Enchant Modelle mit 2.4 GHz Technology.



RC-A



TV-A



SoundClip-A

Zuverlässige Leistung. Dezente Bauform.

Genießen Sie die Möglichkeiten. Klein und filigran gehen Enchant Hinter-dem-Ohr und Im-Ohr-Modelle auf alle Hörbedürfnisse und Anforderungen an die Bauform ein und bieten für jeden Hörverlust eine Lösung. In fünf Technologiestufen bietet Enchant den richtigen Mix aus Features und Anpassmöglichkeiten, den Sonic Kunden sehr zu schätzen wissen.



Beige Taupe Dunkelbraun Grau Dunkelgrau Schwarz* Gold**

miniRITE

Das Enchant miniRITE Modell (mit externem Hörer) ist schmal, diskret und von elegantem Design. Sensible Träger schätzen die leichte und unauffällige Bauform. Standardmäßig verfügt das Enchant miniRITE über eine Wireless Funktion. Genießen Sie die unkomplizierte Lautstärke- und Programmregelung über die Taste am Gerät sowie die lange Laufzeit der Batterie der Größe 312. Das Modell ist auch mit dem ZPower Akkusystem kompatibel.



Beige Taupe Dunkelbraun Grau Dunkelgrau Schwarz*

miniRITE T

Das Enchant miniRITE T bietet ein genauso modernes Design und ist zusätzlich mit einer Telefonspule ausgestattet. Diese erleichtert das Hören am Telefon oder in Gebäuden mit Induktionsschleifen. Das miniRITE T ist mit Tasten zur Lautstärke- und Programmänderung ausgestattet und verwendet Batteriegröße 312. Standardmäßig verfügt das Enchant miniRITE T über eine Wireless Funktion.



Beige Taupe Dunkelbraun Grau Dunkelgrau Schwarz*

BTE 105

Das BTE 105 ist mit seinem ergonomischen Design hervorragend auf starke Leistungsfähigkeit eingestellt. Es verwendet die etwas größere Batteriegröße 13 und ist mit einer Telefonspule ausgestattet. Standardmäßig verfügt es über eine Wireless Funktion. Das benutzerfreundliche Enchant BTE 105 kann mit einem Hörwinkel oder einem Dünnschlauch angepasst werden, um die verschiedensten Hörverluste zu versorgen.

* Schwarz exklusiv für Enchant Hörgeräte 100I80I60.

** Gold exklusiv für Enchant 100 miniRITE.



IIC

CIC

ITC

ITE



Schwarz***



Beige



Hellbraun



Mittelbraun



Mittelbraun

IdO Bauformen

Hier finden Sie außergewöhnliche Vielseitigkeit für eine wirklich individuelle Passform. Mit vier Bauformen, fünf Leistungsstufen, optionaler Wireless Funktion und Features, die sich für leichte bis schwere Hörverluste eignen, sind die Möglichkeiten zahllos!

*** Schwarz nur für IIC erhältlich.



enchant™

Bezaubernd smart.



Zpower®

Schützen Sie die Umwelt und rüsten Sie auf ZPower um!

Das ZPower Akkusystem ermöglicht für Enchant miniRITE Hörgeräte das praktische Aufladen über Nacht. So gehört der ständige Batteriewechsel der Vergangenheit an und die Zahl der Wegwerfbatterien reduziert sich deutlich.

Näheres erfahren Sie von Ihrem Hörakustiker!

www.sonici.de

Bluetooth ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc., USA.

Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad, iPod touch und Apple Watch sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android, Google Play und das Google Play Logo sind eingetragene Marken von Google LLC.

© 2018 Sonic Innovations, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

 **SONIC**
Everyday Sounds Better